



 **PaX-i**

Your Partner in Digital Success

Caractéristiques spécifiques de l'équipement

Qualité d'image
supérieure



2 Capteurs
intégrés



Divers mode
de capture



Consultation
complète



Qualité éprouvée



Spécification &
Dimensions



 **PaX-i**

Your Partner in Digital Success

Chroniques de Panorama

Depuis la première génération d'image panoramique numérique, VATECH a développé la technologie afin de surmonter la limitation de l'image panoramique.

Avec l'Auto Focusing, l'unité capture un creux plus large, reconstruit automatiquement et fournit des images optimales.


La 3ème génération, le Magic Pan, il montre l'image optimisée en personnalisant chacun des pixels basés sur la technologie CMOS.

1st Generation




One Layer

2nd Generation

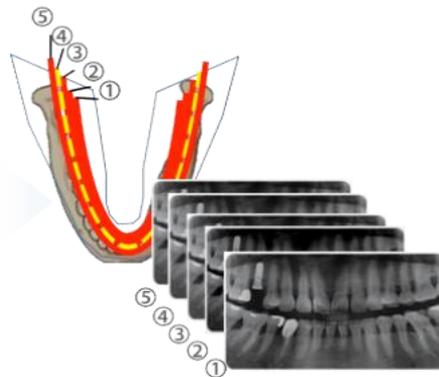

**Auto Focusing
Multi Layer**

3rd Generation

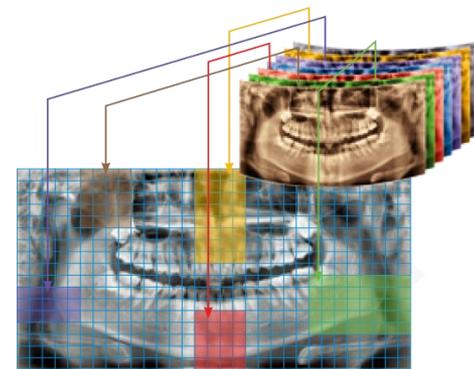

**MAGIC PAN
Multi Layer + Optimal ROI**


Auto Focusing

- L'unité capture un creux plus large, reconstruit automatiquement et fournit des images optimales
- L'utilisateur peut sélectionner 1 image sur 2 ou 5 images


Le moyen d'obtenir un superbe panorama

Sélection d'une couche optimale dans les plusieurs images de l'incisive et les deux molaires.
Et puis le mode Auto Focusing reconstruit l'image. Sélectionnez l'image la plus préférée par rapport aux vos besoins.

Comment fonctionne le mode Auto Focusing

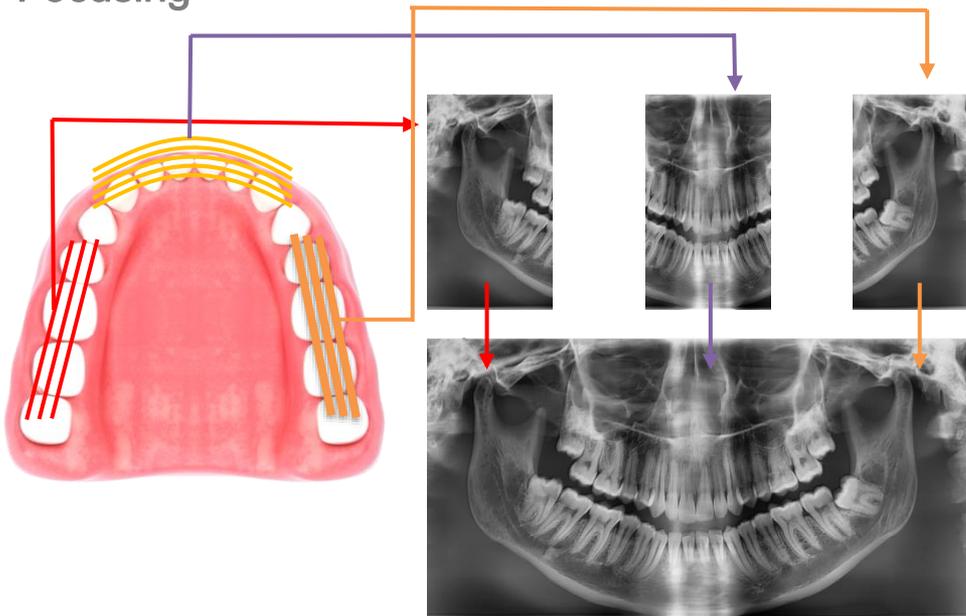


Sélectionnez l'image la plus claire parmi 5 images

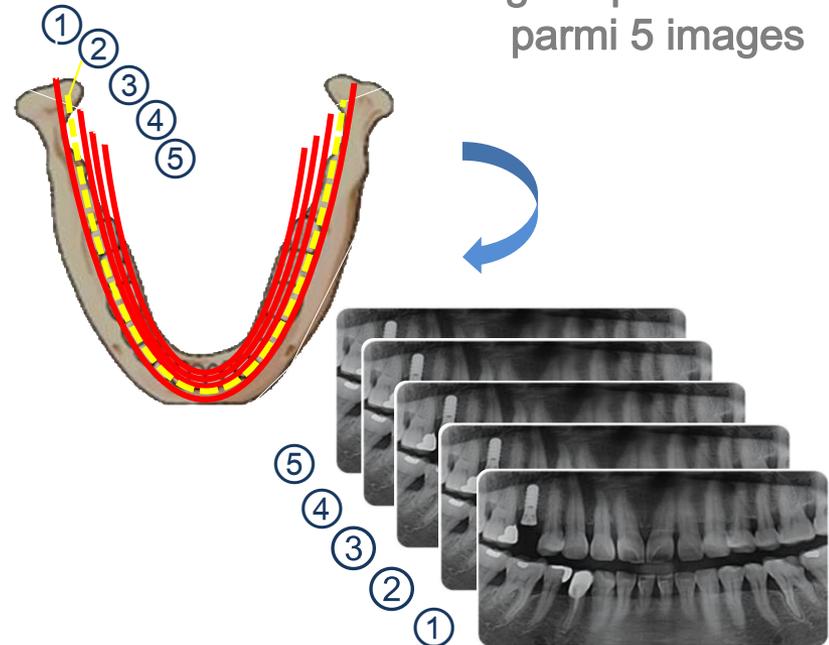

Magic PAN

Pour obtenir l'image panoramique optimale

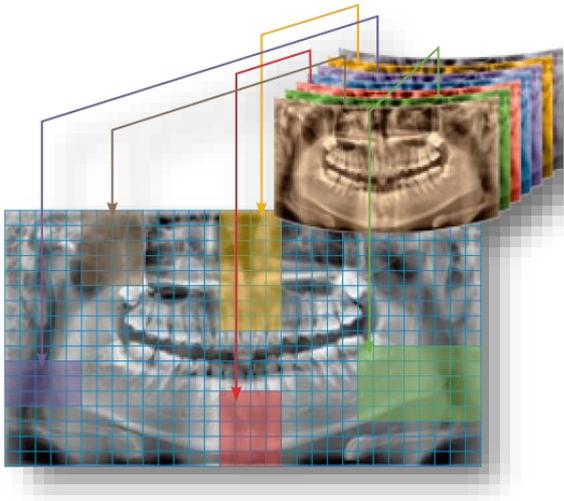

- Il est acquis par l'élimination des images déformées et floues causées par un mauvais positionnement du patient
- Les images partielles focalisées sont réorganisées dans toute l'arcade dentaire, ce qui améliore la qualité de l'image
- L'image devient plus claire surtout dans les zones de l'incisive, de la canine, de l'ATM et du canal radiculaire

Combinez les meilleurs 21 couches

Parmi les 21 couches dans toute la voûte, Magic PAN capte automatiquement les pixels les plus nets.

Cela vous permet d'obtenir la meilleure image à la fois.

Profitez de l'image la plus nette et la plus claire pour votre pratique pendant que Magic PAN finit un puzzle pour vous.

Scan rapide, Ceph Innovation

Ceph devient plus efficace et ???

Grâce au scan rapide de Ceph, il minimise les artefacts de mouvement et permet un flux de travail plus rapide.

Il produit également de superbes images diagnostiques en minimisant les artefacts de mouvement. Les patients ressentent beaucoup moins de contraintes pour être dans une salle de radiographie tout seul. Vous pouvez aussi améliorer la sécurité de vos patients en même temps.

Profitez d'une excellente qualité d'image grâce à la technologie avancée de VATECH.

- 1,9 seconde de scan court produit une superbe qualité d'image.
- Permet un workflow plus rapide et une image plus nette en réduisant les artefacts de mouvement



Qualité d'image supérieure

Artefact métallique minimisé



PaX-i

